


eue

Ace of Face

הידרה-דרמבריישן, פילינג יהלום,
מיקרו זרם חשמלי ו-EMS



באישור מכון התקנים

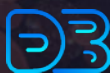 SkinTech
Innovation

 WEERO
מכשירי טיפול בלייזר ופולסות

Eve הוא מכשיר קוסמטי מקצועי, המשלב מספר טכנולוגיות יעילות במיוחד עבור טיפולים אסתטיים:

✓ **הידרה-דרמבריישן** באמצעות טונר ייחודי למכשיר - **X-Stream**.


✓ **פילינג יהלום** (פילינג מכאני).

✓ ארבע פונקציות **מיקרו זרם חשמלי**, שכל אחת מהן מסדירה/ מתניעה מחדש פעילות ביו-חשמלית אחרת בעור ומשיגה מטרות אסתטיות שונות.

✓ ארבע תוכניות EMS - 'אימון' של שרירי הפנים באמצעות גירוי חשמלי.

מכשיר רב-שימושי, חכם ויעיל

מבחר אביזרים לטיפול מיקרו זרם חשמלי

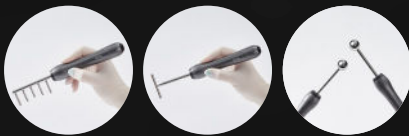

3 סוגים של ראשי עבודה מתכתיים עבור טיפולי מיקרו זרם חשמלי - **ראשים כדוריים**, **ראש מסרק וראש בצורת T** - לנוחות מירבית באזורי טיפול שונים.




כפפות מוליכות, לחוויית טיפול נוחה יותר למטפל ונעימה יותר למטופל.

כפתורי בקרת התזה וניקה

התאימו את עוצמת התזה **טונר X-Stream** ואת עוצמת **ניקת האקום** לסוג העור של המטופלים, למצב העור שלהם ולחוויית הטיפול המועדפת עליהם.

מגוון ראשי הידרה-דרמבריישן/ פילינג יהלום

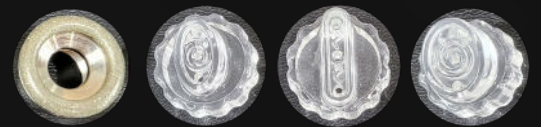

✓ מספר ראשי הידרה-דרמבריישן, עבור איזורי פנים שונים ולטיפול בקרקפת.

✓ 3 ראשי יהלום, בגדלים שונים ובשתי רמות חספוס, מאפשרים פילינג של עור בדרגות עובי שונות ובאזורי פנים שונים.

טונר הידרה-דרמבריישן ייחודי

הנוסחה הייחודית של **X-Stream** - הטונר הייעודי של Eve - יעילה במיוחד לקילוף עדין של פני העור ותוספת לחות משמעותית לשכבת הקרנית.

תוכניות טיפול מובנות, אך ניתנות לשינוי

מנגנון טונר/ פסולת חכם



✓ מנגנון חכם מאפשר הכנסה והוצאה של בקבוקי הטונר X-Stream בקלות.

✓ חיישן חכם מציג התראות על גבי צג המכשיר, כשבקבוק הפסולת עומד לעלות על גדותיו.



מבחר **תוכניות טיפול מובנות**, לנוחות תפעולית, תוך מתן אפשרות להתאים את משך שלבי התוכנית ומשתנים אחרים למטרות הטיפול, למצב העור של המטופלים, ולהעדפות האישיות שלהם.

מיקרו זרם חשמלי



טכנולוגיית מיקרו זרם חשמלי של Eve מזרימה זרמים חשמליים נמוכי עוצמה בתדר נמוך אל תוך העור. אף שכמעט ואינם מורגשים, זרמים חשמליים אלה מחקים את הזרמים הביו-חשמליים של תאים שונים בגוף, ולכן מסדירים, או מתניעים מחדש, תהליכים ביולוגיים תוך-תאיים.


Eve מציע 4 פונקציות שונות של מיקרו זרם חשמלי, הנבדלות זו מזו בעוצמת הזרם החשמלי ובתדרים שלו. כל אחת מהפונקציות הללו מסדירה את הפעילות הביו-חשמלית של תאי מטרה אחרים בגוף, ולכן יש לה השפעה ייחודית על העור:

MTB - התנעה מחדש של חילוף החומרים בעור

פונקציית מיקרו זרם חשמלי MTB 'מתניעה מחדש' את הפעילות המטבולית של התאים המבניים בעור - תאי קרטינוציט ופיברובלסט - שפעילותם נפגעה עם הזמן, עקב הזדקנות, דלקות, נזקי שמש וכדומה.

טיפול מיקרו זרם חשמלי MTB משקם את הפוטנציאל החשמלי של ממברנות התאים הללו וממריץ ייצור ATP, וכך מחדש תהליכי חילוף חומרים והתחדשות בעור.

טיפול MTB מחדש ומשקם עור עייף, אפרפר וחסר חיים, ומחזיר אותו לפעילות תקינה ולמראה צעיר וקורן.

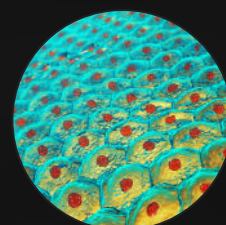


LMP - המרצה של מחזור הדם והניקוז הלימפטי

פונקציית מיקרו זרם חשמלי LMP מסדירה את הפעילות הביו-חשמלית של תאי השריר החלקים בדפנות צינורות הדם והלימפה, וכך משקמת את הזרימה בצינורות אלה. כתוצאה מכך:

✓ טיפול מיקרו זרם חשמלי LMP מסייע לניקוז הלימפטי. הוא מסלק רעלים מהעור ומפחית בצקות ונפיחות באזורי הטיפול.

✓ טיפול LMP גם מסדיר את זרימת הדם בעור, ולכן מומלץ לשיפור מצב העור במקרים של רוציאה, קופרוז והפרעות אחרות של מערכת כלי הדם בפנים.

✓ בנוסף, כתוצאה מהסדרת האספקה של רכיבים חיוניים לתאים והסילוק של תוצרים לא רצויים דרך מערכת הלימפה, טיפול LMP גם מאפשר התנעה מחדש של תהליכי חילוף חומרים והתחדשות רקמות בעור.

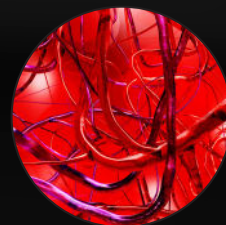

ALV - שיכוך כאבים ואי-נוחות בעור

פונקציית מיקרו זרם חשמלי ALV מתמקדת בתאי העצב בעור. הזרמים החשמליים הזעירים מעלים את סף הרגישות של קצות העצבים בעור, וכך מפחיתים כאב ואי-נוחות במקרים של רגישות יתר של העור, אקנה, תהליכים דלקתיים בעור וכדומה.



MYO - גירוי והרפיית שרירים

פונקציית מיקרו זרם חשמלי MYO מסדירה את הטונוס של שרירי הפנים והצוואר. באמצעות גירוי חשמלי של הסיבים הדקיקים של שרירים אלה, טיפול מיקרו זרם חשמלי MYO מאפשר:

✓ להמריץ שרירים בהיפו-טונוס, וכך להרים ולהדק עור נפול, במחצית התחתונה של הפנים, באזור הצוואר, ומתחת לגבות.

✓ להרפות שרירים בהיפר-טונוס, וכך לטשטש קמטי הבעה, בנקודות בהן שרירי הפנים מכווצים, כגון באזור המצח, בזוויות העין, בין הגבות ומעל הפה.



תוכניות מיקרו זרם חשמלי מובנות



תוכניות מיקרו זרם חשמלי רב-שלביות

תוכניות מיקרו זרם חשמלי מובנות, רב-שלביות, שכל אחת מהן מותאמת להשגת מטרת אסתטיות אחרת:

- טיפול אנטי-אייג'ינג לקבוצות גיל שונות
- טיפול באקנה ובסבוריאה
- טיפול ברוזציה ובקופרוז
- שיקום עור עייף וחסר חיים, או עור פגוע

כל תוכנית רב-שלבית מורכבת מרצף אוטומטי של מספר פונקציות מיקרו זרם חשמלי. סדר השלבים בתוכנית, וכן משך הזמן המוקצב לכל אחד מהם, מותאמים למטרות הייחודיות של התוכנית שנבחרה.

תוכניות מיקרו זרם חשמלי חד-שלביות

התוכניות החד-שלביות מאפשרות למשתמשים במכשיר להפעיל כל אחת מהפונקציות השונות של מיקרו זרם חשמלי (MTB, LMP, MYO & ALV) בנפרד, עבור טיפול שמטרתו היא אחת מאלה:

- **MTB** - שיקום עור עייף וחסר חיים, וכן עור פגוע (למשל בעקבות טיפולים אגרסיביים).
- **LMP** - המרצת זרימת הדם בעור, כדי לשפר את מצבו במקרים של רוזציה, קופרוז, וכדומה, וכן המרצת ניקוז לימפתי, כדי להפחית נפיחות ובצקות בעור.
- **MYO** - המרצת שרירים בהיפו-טונוס בפנים ובצוואר, כדי להרים ולמתוח עור נפול, והרפיית שרירי פנים בהיפר-טונוס, כדי לשטשש קמטי הבעה.
- **ALV** - שיוך כאבים ואי-נוחות בעור.

מבחר אביזרים לטיפול מיקרו זרם חשמלי

ראש עבודה בצורת מסרק -
מיועד לטיפול מיקרו זרם חשמלי בקרקפת, כדי להמריץ את זרימת הדם, וכך לחזק את שורשי השערה ולהפחית סבוריאה וקשקשת.



ראשי עבודה כדוריים -
מתאימים לכל אזורי הטיפול ולכל פונקציות מיקרו זרם חשמלי.




כפפות מוליכות -
מאפשרות חוויית טיפול נוחה יותר למטפל ונעימה יותר למטופל.



ראש עבודה בצורת T -
מיועד לכיסוי אזורי עור גדולים יותר (כגון הלחיים או הצוואר) בנוחות וביעילות.



EMS- 'אימון' שרירי הפנים באמצעות גירוי חשמלי

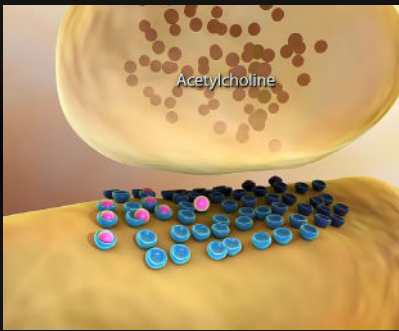

פונקציית EMS של Eve מאפשרת 'אימון' יעיל של השרירים הרפויים בחלק התחתון של הפנים, במטרה להסדיר את טונוס השרירים, וכתוצאה מכך להרים עור נפול.

על ידי הזרמת פולסים חשמליים בעוצמה נמוכה לנקודות ההינע (motor points) של השרירים, טיפולי EMS גורמים להפרשה של אצטילכולין (ACh) מקצות העצבים. אצטילכולין נקשר לקולטנים על ממברנת השריר, וגורם להתכווצות השרירים.

הרצף החוזר ונשנה של התכווצות והרפיית השרירים במהלך טיפול EMS משקם את הפעילות התקינה של השרירים ומחזק את הטונוס שלהם. **שיקום טונוס השרירים גורר הרמה והידוק של העור.**

4 תוכניות EMS שונות

Eve מציע 4 תוכניות EMS, הנבדלות זו מזו בתדר ובתבנית של הפולסים החשמליים שלהן. הבחירה באחת מארבע תוכניות אלה, והיכולת לכוון את עוצמת הפולסים של כל תוכנית, מאפשרות למשתמשים במכשיר להתאים טיפול EMS לרגישות האישית של כל מטופל, כך ש:

✓ הטיפול בטכנולוגיית EMS יפעיל ביעילות את השרירים הרפויים ויחזק את הטונוס שלהם,

✓ ההתכווצות החוזרת ונשנית של השרירים, גם למשך 5-10 דקות רצופות, כפי שנדרש כדי שהטיפול יניב תוצאות, לא תהיה בלתי-נסבלת עבור המטופל.



טיפול EMS ללא מאמץ

Eve מאפשר לבצע טיפול EMS ללא מאמץ, באמצעות חיבור האלקטרודות של המכשיר לרפידות, המודבקות על גבי נקודות אסטרטגיות לאורך שרירי הפנים.

טיפול EMS כזה, המבוצע במינימום מאמץ מצד הקוסמטיקאית ומספק למטופל חוויית טיפול נעימה, מהווה 'אימון' יעיל של שרירי הפנים, המשקם את טונוס השרירים וגורר הרמה והידוק משמעותיים של עור נפול.

טיפול מיקרו זרם חשמלי ו-EMS

✓ תוצאות טיפול מרשימות
✓ השפעה מצטברת לטווח ארוך

✓ טיפולים נעימים, ללא כאב
✓ חזרה מיידית לשגרה

הידרה דרמבריישן


טכנולוגיית הידרה-דרמבריישן של Eve יעילה במיוחד לניקוי יסודי וקילוף עדין של פני העור, וכן להזנת שכבת הקרנית בלחות. טכנולוגיה זאת אידיאלית כשלב ראשון בכל טיפול אסתטי.

ידית העבודה של Eve מתיזה סילונים סיבוביים של **הטונר הייחודי של המכשיר - X-Stream** - על פני העור. הטונר מפרק פסולת שהצטברה על העור, ומקלף בעדינות את פני העור. הוא גם מזין את שכבת הקרנית בלחות.

בעזרת ניקת ואקום, ידית הטיפול שואבת את הפסולת, עודפי הסבון והתאים המתים שהוסרו מעל פני העור. ניקת הוואקום גם מחלצת לכלוך שהצטבר בתוך הנקבוביות.

התוצאה של טיפולי הידרה-דרמבריישן באמצעות Eve היא **עור נקי, עתיר לחות וזוהר, במרקם אחיד יותר. הטיפול גם מפחית משמעותית קרדיות דמודקס, קומדונים ונקבוביות מורחבות.**

4 יתרונות אסתטיים

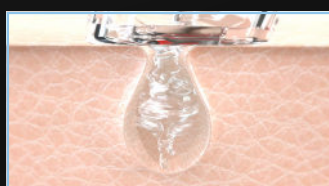


הזנה בלחות

הרכיבים של הטונר הייחודי X-Stream מגבירים את רמת הלחות בשכבת הקרנית.



חילוץ ושאיבה

פונקציית ניקת ואקום מחלצת, ללא כאב, פסולת מתוך הנקבוביות.

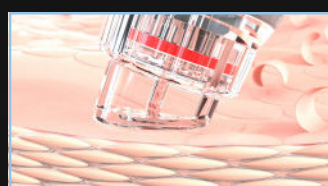

קילוף עדין


קילוף עדין מאוד של תאי עור מתים ופסולת, באמצעות PHA, LHA, ואנזימים פרוטאוליטים.




ניקוי יסודי

סילוני X-Stream מסירים לכלוך, עודפי סבון וקרדיות דמודקס מעל פני העור.

אור LED כחול / לבן

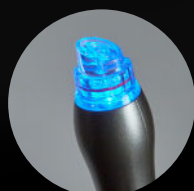


אור כחול, משמיד חיידקי P אקנה בזקיקי השערה ונקבוביות.

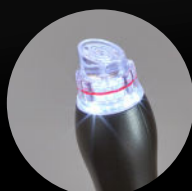

תאורה בהירה, לראות טובה יותר.

מספר ראשי הידרה-דרמבריישן

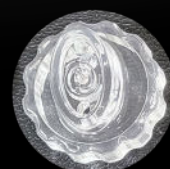

ראש קטן



ראש גדול



ראש ניקוי



ראש לקרקפת

פילינג יהלום

פילינג יהלום באמצעות Eve מקלף שכבה אחר שכבה של תאי עור מתים, יחד עם פסולת ועודפי סבון, מעל פני העור. הפסולת שהוסרה נשאבת מפני העור באמצעות ניקת ואקום, ומגלה תחתיה עור בריא וצעיר יותר.

פילינג יהלום משפר את מראה העור. **טיפול זה יעיל:**

- ✓ לצמצום כתמי עור והשגת גוון עור אחיד.
- ✓ להפחתת קרטוזיס וחטטים שטחיים והחלקת מרקם העור.
- ✓ לטשטוש קמטוטים בעור.



X-Stream

X-Stream הוא הטונר הייחודי עבור טיפולי הידרה-דרמבריישן באמצעות Eve. טונר זה, המתאים לכל סוגי העור, מנקה ביסודיות, מקלף בעדינות, וכן מזין בלחות ומחדש את פני העור.

הרכיבים הפעילים העיקריים של X-Stream הם:


אנזימים פרוטאוליטיים

ברומלין

ברומלין מסייע לאנזימים הפרוטאוליטיים בשכבת הקרנית לפרק חלבונים, וכך מאפשר השרה ותחלופה תקינה של תאים באפידרמיס.

יתרונות ייחודיים

- ✓ קילוף עדין של שכבת הקרנית
- ✓ הפחתת קמטוטים וקמטים עדינים

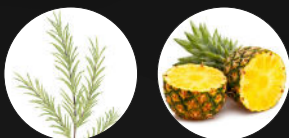

PHA (Poly Hydroxy Acid)

חומצה לקטוביונית

PHA יעיל מאוד בהזנת שכבת הקרנית בלחות ובקילוף עדין שלה, המתאים גם לעור רגיש.

PHA מסייע בהשגת גוון עור אחיד ובתיקון נזקי שמש, וכן מגן על העור מפני סכנות סביבתיות.

יתרונות ייחודיים

- ✓ הזנת שכבת הקרנית בלחות
- ✓ קילוף עדין של פני העור
- ✓ שיפור מרקם העור וגוון העור

AHA (Alpha Hydroxy Acid)

חומצה ציטרית

חומצה ציטרית מאזנת את רמת ה-PH בעור, וכך מאפשרת את פעולת הניקוי של הטונר.

LHA (Lipo Hydroxy Acid)

חומצה סליצילית

LHA מאפשר קילוף עדין והדרגתי של פני העור, שאינו מגרה אפילו עור עדין. הוא גם מסייע בהפחתת אדמומיות בעור ובחידוש פני העור.

LHA גם מצמצם ריכוזים של חיידקי P אקנה בנקבוביות.


יתרונות ייחודיים

- ✓ קילוף עדין מאוד של פני העור
- ✓ הפחתת אקנה
- ✓ שיוך אדמומיות בעור

רכיבים פעילים נוספים

חומצה היאלורונית, ניאצינמיד

ההשפעה החיובית של רכיבים אלה על העור כוללת:

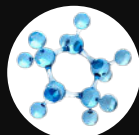

- ✓ שיפור מרקם העור
- ✓ הוספת ברק לעור
- ✓ הבהרת כתמי עור
- ✓ שיקום מאזן המים/שמנים הטבעי בעור
- ✓ הרגעת גירויים בעור
- ✓ השפעה נוגדת חמצון



eue

Ace of Face

מפרט טכני

מכשיר - 20 x 40 x 30 ס"מ עגלה - 36 x 40 x 105 ס"מ	מידות נטו
מכשיר - 35 x 55 x 50 ס"מ עגלה - 48 x 18 x 76 ס"מ	מידות אריזה
מכשיר - 13 ק"ג עגלה - 8.5 ק"ג	משקל אריזה
100-240 V, 50-60 Hz Max 100VA (24V / 5A)	צריכת חשמל
זרם חשמלי - 10-1000 μ A תדר - 6-500 Hz משרעת פולסים חשמליים - Max 1000 μ A	תוכניות מיקרו זרם חשמלי
זרם חשמלי - 1-3 mA תדר - 2-2000 Hz משרעת פולסים חשמליים - Max 3 mA	תוכניות EMS
650 mmHg	עוצמת יניקה של ראשי הידרה-דרמבריישן



ד.ב. סקינטק אינוביישן

☎ 04 677 2080 | www.dbsti.co.il | info@dbsti.com

האומן 12 (בית מרים), חדרה